



Soluções para alta estética

ACESSÓRIOS

- 05 Cristais Lapidados
- 06 Painless
- 07 Power Block
- 08 Power Plac

CIMENTOS

- 09 Natures Try-in
- 09 Natures Veneer

CLAREADORES

- 11 Power Bleaching Home
- 12 Power Bleaching Home Aromas
- 13 Power Bleaching 37% Office

RESINAS

- 15 Zirconflo
- 17 Zirconfill



Maquira, muito mais do que 20 anos de história

A Maquira foi fundada há 20 anos, mas a nossa história começou muito antes. Em 1976, antes mesmo de eu nascer, meu pai começou a comercializar produtos dentários e, portanto, cresci e trabalhei no mundo dos produtos odontológicos. Estudando e analisando necessidades e oportunidades do mercado, em 2000, comecei a produzir o que seria o primeiro produto da Maquira: a caixa de aparelho.

Desde então, a Maquira tem apresentado um crescimento contínuo, até que nos tornamos a Maquira Dental Group: um grupo com quatro marcas e mais de 450 produtos. Nosso compromisso diário é focar no essencial: oferecer um portfólio completo, entregar as melhores soluções odontológicas e atender com excelência todos os nossos clientes. Investimos constantemente no desenvolvimento de novos produtos, tecnologia e expansão para sermos a maior empresa da América Latina em soluções digitais, biomateriais e consumíveis odontológicos.

Inspirar sorrisos saudáveis

O nosso propósito é inspirar sorrisos saudáveis. Temos em mente o que desejamos contribuir e, para alcançar isso, as marcas Maquira, Makertech, Hemospon e BM4 contam com linhas completas de soluções em consumíveis, odontologia digital, biomateriais, compósitos e alta estética. O parque fabril da Maquira Dental Group está sempre crescendo para que possamos desenvolver e produzir produtos inovadores e que irão atender às crescentes necessidades do mercado. Dos acessórios à impressão 3D, não buscamos apenas inovação, mas mantemos o compromisso de fornecer produtos seguros, eficazes e de alta qualidade.



Antonio Leme Junior
Fundador e Presidente



Cristais Lapidados

Pequenos cristais de vidro lapidados para uso em estética dental

Indicação:

Cristais lapidados indicados como piercing estético de superfície dental.

Compatível com diversos sistemas adesivos do mercado.

Disponível em várias cores e tamanhos.

Apresentações: • Cristais Lapidados Nº 3 - 10 unidades
• Cristais Lapidados Sortidos - 10 unidades

REG. ANVISA Nº: 80322400124



Painless

Gel dessensibilizante

1,5% 5%

Painless é um gel dessensibilizante à base de oxalato de potássio para o tratamento da hipersensibilidade dentinária.

Com sua fórmula exclusiva, Painless é o dessensibilizante mais versátil disponível atualmente no mercado, seu protocolo de uso é variado e pode ser utilizado para tratar hipersensibilidade resultante de estímulos térmicos, físicos, osmóticos e químicos.

Contém exclusiva fórmula com oxalato de potássio, o agente dessensibilizante mais eficaz do mercado.

Contém fluoreto de sódio, auxilia a remineralização do esmalte dental durante o tratamento.

Proporciona uma maior segurança, não interfere com a homeostasia da polpa, nem descolore o dente ou a mucosa.

Disponível nas versões:
• 1,5% - Uso caseiro
• 5% - Uso profissional

Apresentações: • Painless 1,5% | Painless 5%
1 Seringa com 3 g e 1 ponteira

REG. ANVISA Nº: 80322400104



Power Block

Gel hidrossolúvel bloqueador de oxigênio

Indicação:

Power Block é um gel aromatizado de glicerina, de ação lubrificante e impermeável ao oxigênio, para impedir o contato de resinas compostas e cimentos resinosos com o oxigênio (evitar a inibição da polimerização pelo oxigênio) e lubrificar os fios de afastamento gengival.



Totalmente solúvel em água, fácil remoção após fotopolimerização.

Aroma de Açaí, tratamento mais agradável.

Apresentação: • 3 Seringas com 3 g e 3 ponteiros

REG. ANVISA Nº: 80322400133



Power Plac

Placas de EVA para clareamento

Indicação:

Power Plac é indicada para uso em plastificadores a vácuo por profissionais da odontologia, com a finalidade de confecção de moldeiras odontológicas. Disponíveis nas opções quadrada ou redonda.



Excelente flexibilidade, possui sistema de memória elástica, tornando-a mais flexível.

Placa biocompatível, não causa irritações em contato com o organismo.

100% EVA: impermeáveis, resistentes e com maior durabilidade.

Dimensões:

- Quadrada: 135 x 135 mm
- Redonda: 135 mm
- Espessura: 1 mm

Apresentações: • Power Plac redonda | Power Plac quadrada
Embalagem com 5 ou 10 placas

REG. ANVISA Nº: 80322400134



Natures Try-in & Veneer

Cimento resinoso fotopolimerizável e material de prova para cimentação

Natures Try-in:

Produto utilizado para que o profissional possa testar a cor e adaptação da peça protética antes da cimentação definitiva, possibilita uma visão antecipada do resultado final.

Natures Veneer:

É um cimento resinoso fotopolimerizável, indicado para cimentação de lentes de contato dentais e facetas indiretas que não apresentem infraestrutura opaca.



Excelente consistência, mantém estável a posição da peça (faceta e lente de contato) durante a cimentação.

Estabilidade de cor e longevidade estética do caso ao longo do tempo.

Natures Veneer apresenta compatibilidade de cor com Natures Try-in.

Excelente capacidade de polimerização.

Disponível nas cores:

- Light+
- Yellow
- Light
- Yellow+
- Clear

- Apresentações:**
- Natures Veneer | Natures Try-in: 1 Seringa com 2 g e 5 ponteiros
 - Kit: 3 Seringas de Natures Veneer com 2 g cada, 3 seringas de Natures Try-in com 2 g cada e 6 ponteiros




NATURES VENEER: REG. ANVISA Nº: 80322400107
NATURES TRY-IN: REG. ANVISA Nº: 80322400105

Transformação do sorriso com lentes de contato dentais




Caso inicial da paciente, evidenciando um pronunciamento das amelas incisais e leve mal posicionamento dental

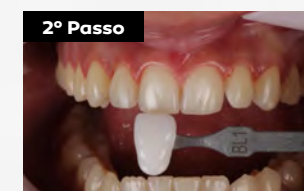


Seleção de cor da futura restauração. A paciente selecionou a cor BL1



Preparos dentais suficientemente invasivos

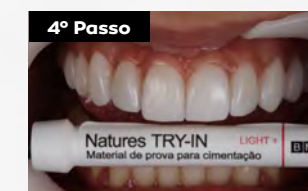

Prova de cimentação com Natures Try-in Light+

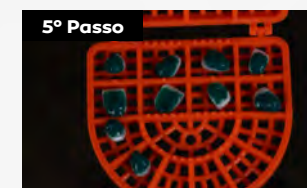

Condiçãoamento da cerâmica com ácido fluorídrico a 10%, por 20 segundos



Limpeza interna da peça com ácido fosfórico a 37% por 30 segundos




Aplicação de silano na superfície interna da cerâmica




Aplicação de sistema adesivo na superfície interna da cerâmica, sem fotoativação




Condiçãoamento do esmalte com ácido fosfórico a 37% por 30 segundos

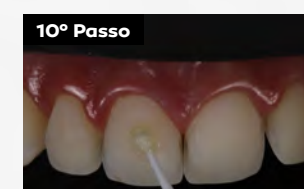

Aplicação do sistema adesivo sobre o esmalte dental, sem fotoativação

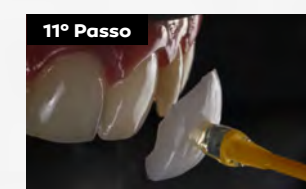

Inserção do cimento resinoso Natures Veneer Light + na cerâmica e posicionamento no dente

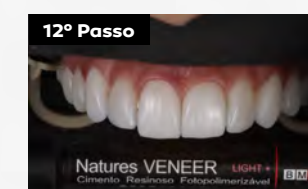

Lentes de contato cerâmicas cimentadas

Power Bleaching Home

Gel clareador dental para uso caseiro

10%

16%

22%

Indicação:

Power Bleaching é destinado ao clareamento dental nos seguintes casos:

Dentes vitais:

Naturalmente escuros ou amarelados, escurecidos por corantes, idade, trauma, manchados em grau suave por tetraciclina e por fluorose.

Dentes não vitais:

Em associação ao clareamento dental interno.

Contém exclusiva fórmula com oxalato de potássio, o agente dessensibilizante mais eficaz do mercado.

pH neutro, mesmo durante o tratamento.

Excelente consistência, mais segurança e maior rendimento por seringa.

Maior rendimento, a seringa pode ser utilizada várias vezes mesmo após aberta, desde que esteja dentro do prazo de validade e em condições de armazenamento adequadas.

Apresentações: • Power Bleaching 10%, 16% e 22%:
1 seringa, 5 seringas ou 7 seringas

Conteúdo das Apresentações: • 1 Seringa com 3 g e 1 ponteira
• 5 Seringas com 3 g, 5 ponteiras, 1 porta moldeira e 2 placas de EVA
• 7 Seringas com 3 g, 7 ponteiras, 1 porta moldeira e 2 placas de EVA



Power Bleaching Home Aromas

Gel clareador dental para uso caseiro

10%

16%

22%

Indicação:

Power Bleaching é destinado ao clareamento dental nos seguintes casos:

Dentes vitais:

Naturalmente escuros ou amarelados, escurecidos por corantes, idade, trauma, manchados em grau suave por tetraciclina e por fluorose.

Dentes não vitais:

Em associação ao clareamento dental interno.

Maior conforto para o paciente durante o tratamento, devido à presença de aromas.

Aromas:

- Açaí e Hortelã

Apresentações: • Açaí - Power Bleaching 16% e 22%:
1 seringa, 5 seringas ou 7 seringas
• Hortelã - Power Bleaching 10%, 16% e 22%:
1 seringa, 5 seringas ou 7 seringas

Conteúdo das Apresentações: • 1 Seringa com 3 g e 1 ponteira
• 5 Seringas com 3 g, 5 ponteiras, 1 porta moldeira e 2 placas de EVA
• 7 Seringas com 3 g, 7 ponteiras, 1 porta moldeira e 2 placas de EVA



Power Bleaching 37% Office

Gel clareador dental para consultório

Indicação:

Power Bleaching 37% Office é destinado ao clareamento de dentes vitais e não vitais.

Dentes vitais:

Naturalmente escuros ou amarelados, escurecidos por corantes, pela idade, por trauma, manchados em grau suave por tetraciclina e manchados por fluorose.

Dentes não vitais:

Em associação ao clareamento dental interno.



Prático, pronto para uso e não precisa ser ativado.

pH próximo da neutralidade.

Apresentações: • 1 Seringa com 3 g e 1 ponteira
• 3 Seringas com 3 g cada e 3 ponteiras



A diferença está nos detalhes:

Conheça a linha completa de clareadores dentais que elevam sorrisos a um novo patamar

Acesse nosso site e conheça nossa linha completa: www.bm4.com.br

Zirconflow

Resina composta fotopolimerizável de baixa viscosidade

Indicação:

- Restauração de preparos pouco invasivos;
- Selamento de fôssulas e fissuras;
- Base/forramento sob restaurações diretas;
- Restaurações classe I, III e V (incluindo pequenas restaurações classe I não sujeitas à tensão);
- Preparo tipo túnel;
- Reparo de defeitos de esmalte;
- Restaurações de dentes decíduos;
- Colagem de fragmentos dentários;
- Reparo em resina composta;
- Lesões cervicais não cariosas;
- Planificar paredes de preparo.



Tixotropia adequada.

Resistência mecânica elevada.

Alta capacidade de polimerização.

Disponível nas cores:

- A1 / A2 / A3 / Bleach e Opaco



Apresentação: • 1 Seringa com 4 g e 10 ponteiros



A aliada que faltava no seu consultório



Manter o campo operatório livre de contaminação. Lavar e secar a superfície dentária



Fazer o condicionamento ácido com as instruções do produto



Aplicar o sistema adesivo de acordo com as recomendações do material



Fotopolimerizar o material por 20 segundos



Aplicar Zirconflow diretamente na cavidade. Cada camada não deve ter espessura superior a 2 mm



Fotoativar cada camada por 20 segundos



Verificar a oclusão com papel para registro



Dar acabamento com instrumentos de escolha do profissional

Zirconfill

Resina composta nanohíbrida
fotopolimerizável

Zirconfill é uma resina composta nanohíbrida, fotopolimerizável e radiopaca, desenvolvida para uso em restaurações de dentes anteriores e posteriores com alto teor de carga inorgânica, sendo esta carga formada, principalmente, por partículas de zircônia/sílica.

Indicação:

- Restaurações diretas de todas as classes (I, II, III, IV e V);
- Correções estéticas;
- Facetas diretas em resina composta;
- Colagem de fragmentos de dentes;
- Restaurações indiretas inlays - onlays;
- Confeção de núcleo de preenchimento;
- Estabilização de dentes anteriores.

Consistência ideal:
alto desempenho e tixotropia.

Propriedades mecânicas superiores: a carga mista de zircônia/sílica permite uma superioridade das propriedades mecânicas da Zirconfill.

Partículas nanométricas, melhor capacidade de polimento com manutenção prolongada e excelente lisura superficial.

Disponível nas cores:

- DA2 | DA3 | DA3,5 | DA4
DB1 | D-BLEACH
E BLEACH-H | EA1 | EA2
EA3 | EA3,5 | EA4 | EB1
EB3 | EC2 | EC3 | OA3
T BLUE | T NEUTRAL

Apresentação: • 1 Seringa com 4 g



Linha BM4, o alicerce para
resultados extraordinários
nos seus procedimentos